


## Renouer avec une gestuelle naturelle du poignet pour encore plus de liberté



### Caractéristiques :

- Mouvements fluides et naturels pour plus de confort et de précision dans la réalisation des tâches quotidiennes
- Absorption des chocs et vibrations
- Simplicité d'utilisation grâce au loquet magnétique permettant le verrouillage/déverrouillage du poignet
- Atout majeur pour les patients amputés bilatéraux
- Disponible dans les 2 couleurs des mains **i-limb™** : neutre ou noire

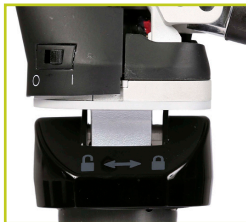

Verrouiller le poignet **flexion wrist** pour maintenir la prothèse **i-limb™** inclinée selon un angle de  $+40^\circ$ ,  $+20^\circ$ ,  $0^\circ$ ,  $-20^\circ$ ,  $-40^\circ$ .



Déverrouiller le poignet **flexion wrist** pour le rendre souple et élastique, selon une amplitude comprise entre  $-40^\circ$  et  $+40^\circ$ .



En fonction de l'angle d'inclinaison choisi lorsque le poignet **flexion wrist** est verrouillé, le positionnement est amélioré pour la réalisation de tâches fonctionnelles telle que :


- Ecrire
- Se brosser les cheveux
- Taper à l'ordinateur
- Utiliser des ustensiles de cuisine ou des couverts
- Fermer/boutonner un vêtement
- Manipuler de petits objets

En mode déverrouillé, le poignet **flexion wrist** permet un meilleur positionnement pour la réalisation de tâches fonctionnelles telles que :

- Balayer
- Nettoyer un plan de travail
- Pousser un caddie de supermarché
- Ouvrir une porte
- Maintenir un objet tout en cuisinant

# flexion wrist

Dimensions fournies en mm

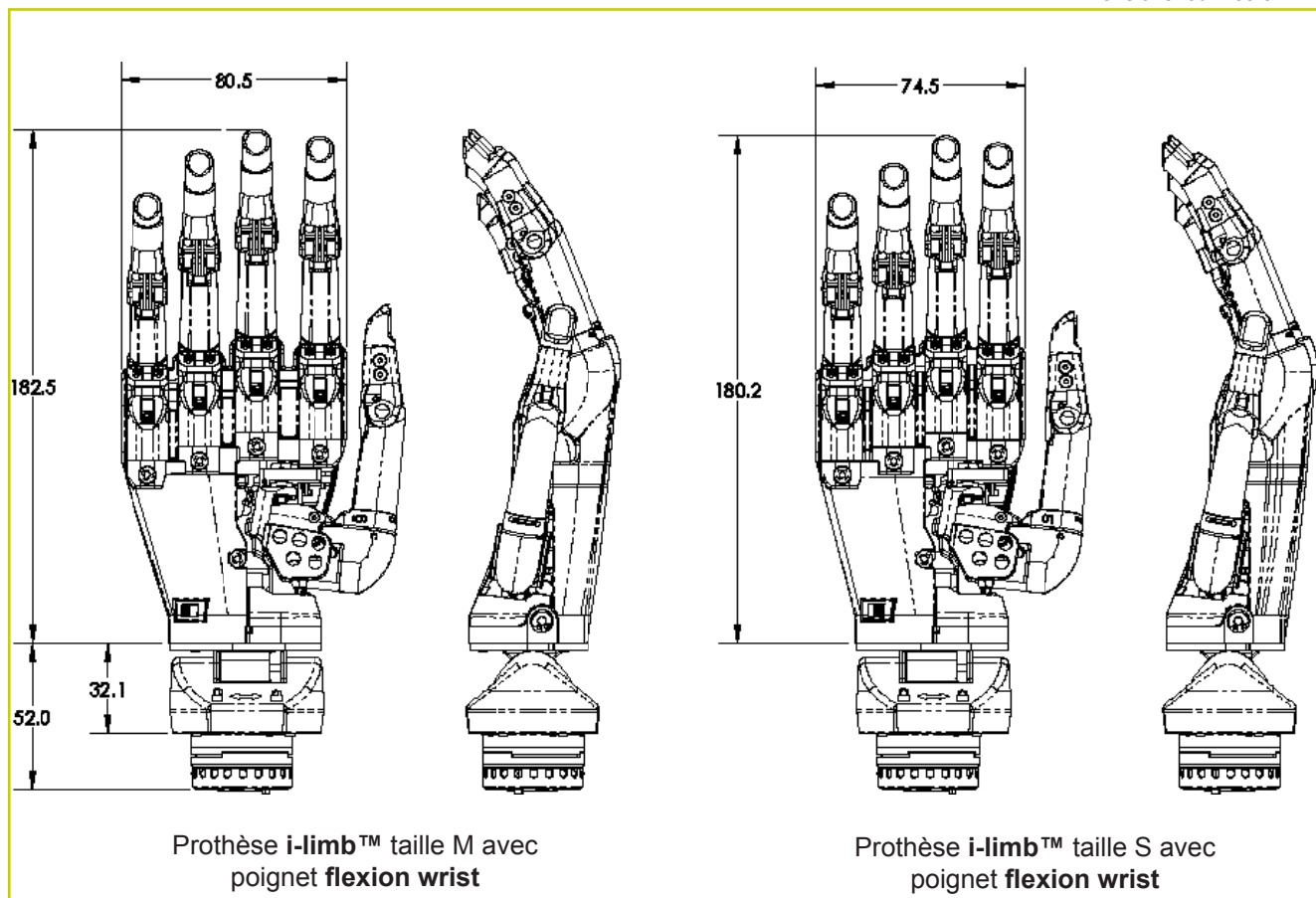

## Informations techniques

Poids du poignet flexion wrist	161g
Amplitude de mouvement (mode déverrouillé)	+40° to -40°
Positions verrouillées	+40°, +20°, 0°, -20°, -40°

Référence produit	Modèle
PL270001	i-limb ultra revolution flexion wrist droite taille M couleur neutre
PL271001	i-limb ultra revolution flexion wrist gauche taille M couleur neutre
PL272001	i-limb ultra revolution flexion wrist droite taille S couleur neutre
PL273001	i-limb ultra revolution flexion wrist gauche taille S couleur neutre
PL274001	i-limb ultra revolution flexion wrist droite taille M couleur noire
PL275001	i-limb ultra revolution flexion wrist gauche taille M couleur noire
PL276001	i-limb ultra revolution flexion wrist droite taille S couleur noire
PL277001	i-limb ultra revolution flexion wrist gauche taille S couleur noire

Référence produit	Modèle
PL206001	i-limb ultra flexion wrist droite taille M couleur neutre
PL207001	i-limb ultra flexion wrist gauche taille M couleur neutre
PL208001	i-limb ultra flexion wrist droite taille S couleur neutre
PL209001	i-limb ultra flexion wrist gauche taille S couleur neutre
PL210001	i-limb ultra flexion wrist droite taille M couleur noire
PL211001	i-limb ultra flexion wrist gauche taille M couleur noire
PL212001	i-limb ultra flexion wrist droite taille S couleur noire
PL213001	i-limb ultra flexion wrist gauche taille S couleur noire